

EEN REDDINGSACTIE UITVOEREN

1



Reageert de patiënt?

2



Bel het noodnummer!

3



Haal AED.

4



Plaats AED op de grond.
Open deksel.

5



Verwijder kleding.
Ontbloot borst.

6



Bevestig pads.

7



Raak de patiënt niet aan!

8




Als opgedragen,
druk op rode knipperende knop.

9



Indien aanwezig,
plaats reanimatieapparaat.

10

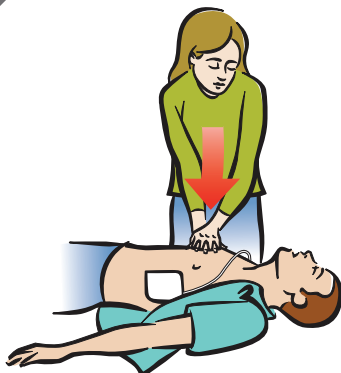

Volg instructies van AED.
Geef compressies.

11



Als opgedragen,
geef beademingen.

Semi-automatische AED



Cardiac Science en het Shielded Heart-logo zijn handelsmerken van Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012, Alle rechten voorbehouden.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 VS
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Duitsland



70-01091-15rD

