

EEN REDDINGSACTIE UITVOEREN

1



Reageert de patiënt?

2



Bel het noodnummer!

3




Haal AED.

4



Plaats AED op de grond.
Open deksel.

5

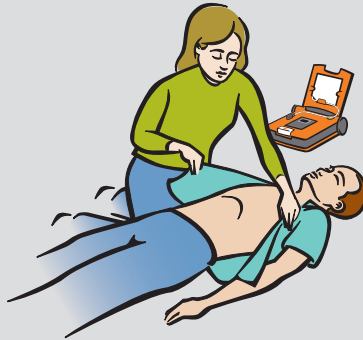

Verwijder kleding.
Ontbloot borst.

6



Bevestig pads.

7



Raak de patiënt niet aan!

8




Als opgedragen,
druk op rode knipperende knop.

9



Indien aanwezig,
plaats reanimatieapparaat.

10

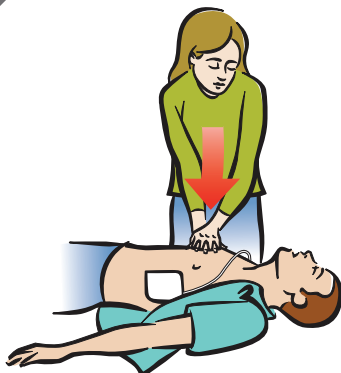

Volg instructies van AED.
Geef compressies.

11



Als opgedragen,
geef beademingen.

Semi-automatische AED



Cardiac Science en het Shielded Heart-logo zijn handelsmerken van Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012, Alle rechten voorbehouden.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 VS
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Duitsland



70-01091-82rB



DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

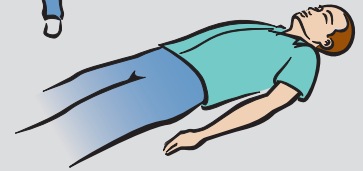

4



Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6



Placez les électrodes.

7



Ne touchez pas le patient.

8




Si le système vous y invite, appuyez sur le bouton rouge clignotant.

9



Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

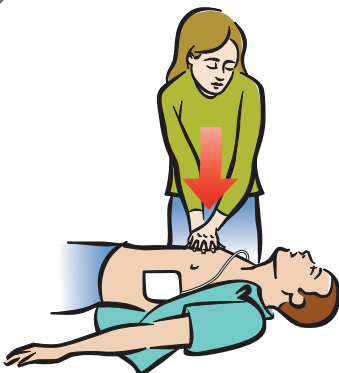

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

DAE semi-automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012. Tous droits réservés.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186, États-Unis
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hanovre
Allemagne



70-01091-82rB

