

執行急救

1



病人有無反應？

2



打電話請求急救服務！

3



取出AED
(自動體外心臟去顫器)。



4



將 AED 置於地上。
打開盒蓋。

5



解開衣服。
使胸部外露。

6



將電極片貼好。

7



勿接觸病人。

8




如有需要，
AED將會自動提供電擊。

9



如果有的話，放好CPR
(心肺復甦)裝置。

10

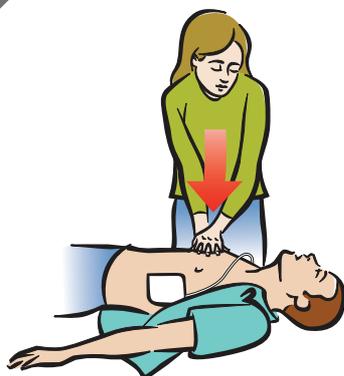

遵照AED的提示。
施壓於胸部。

11



如有提示，對口腔呼氣。

自動型 AED



“心臟科學” (Cardiac Science) 和盾心徽標是
“心臟科學公司” 商標。版權所有 © 2012 保留所有權利。
地址：美國 N7 W22025 Johnson Drive,
Waukesha, WI 53186 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany 德國



70-01092-27 A

