

CÓMO REALIZAR UN RESCATE

1



¿El paciente reacciona?

2




¡Llame a los servicios de emergencia!

3



Busque el DEA.

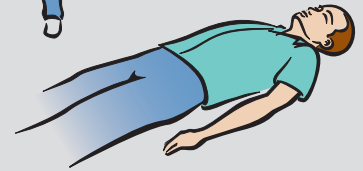

4



Coloque el DEA sobre el suelo.
Abra la tapa.

5



Quite la ropa del pecho del paciente.
Descubra el tórax.

6



Coloque los electrodos.

7



No toque al paciente.

8




Si se ordena, presione el botón rojo intermitente.

9



Si hay un dispositivo de RCP, colóquelo.

10

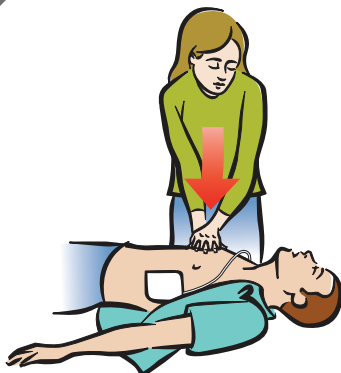

Siga las indicaciones del DEA.
Inicie las compresiones.

11



Si se indica, realice respiración boca a boca.

DEA semiautomático



Cardiac Science y el logotipo de Shielded Heart son marcas comerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Todos los derechos reservados.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 EE.UU.
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Alemania



70-01972-03 B

