

PROCEDIMIENTO DE REAMINACIÓN

1



¿Responde el paciente a los estímulos?

2




Llame a los servicios de urgencias.

3



Consiga un dispositivo DEA.

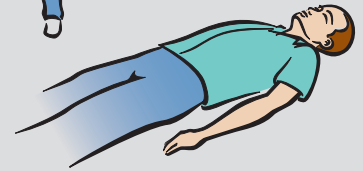

4



Coloque el DEA en el suelo. Abra la tapa.

5



Retire la ropa al paciente. Deje el pecho al descubierto.

6



Coloque los electrodos.

7



No toque al paciente.

8




Si el DEA se lo indica, pulse el botón rojo parpadeante.

9



Coloque el dispositivo de RCP, si dispone de uno.

10

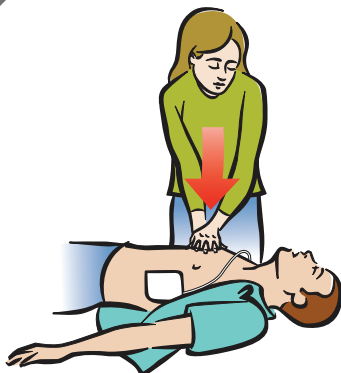

Siga las instrucciones del DEA. Realice compresiones.

11



Si se le indica, realice insuflaciones.

DEA semiautomático



Cardiac Science y el logotipo del corazón blindado son marcas comerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Todos los derechos reservados.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 EE. UU.
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Alemania



70-01972-05 A

