

# CÓMO REALIZAR UN RESCATE

1



¿El paciente reacciona?

2




¡Llame a los servicios de emergencia!

3



Busque el DEA.

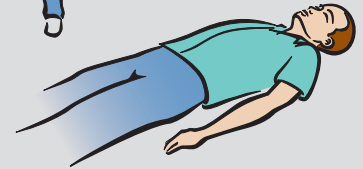

4



Coloque el DEA sobre el suelo. Abra la tapa.

5



Quite la ropa del pecho del paciente. Descubra el tórax.

6



Coloque los electrodos.

7



No toque al paciente.

8




Si es necesario, el DEA emitirá una descarga automáticamente.

9



Si hay un dispositivo de RCP, colóquelo.

10

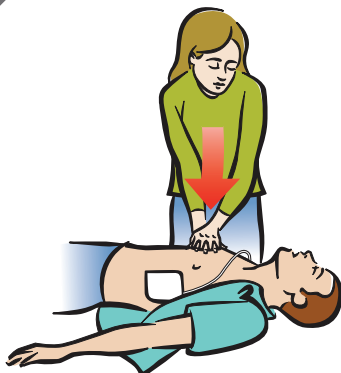

Siga las indicaciones del DEA. Inicie las compresiones.

11



Si se indica, realice respiración boca a boca.

**AED automático**



Cardiac Science y el logotipo de Shielded Heart son marcas comerciales de Cardiac Science Corporation. Copyright © 2019 Todos los derechos reservados. 500 Burdick Parkway, Deerfield, WI 53531 EE.UU. [www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Alemania



70-02001-03 A

