

# DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

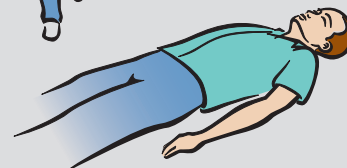

4




Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6

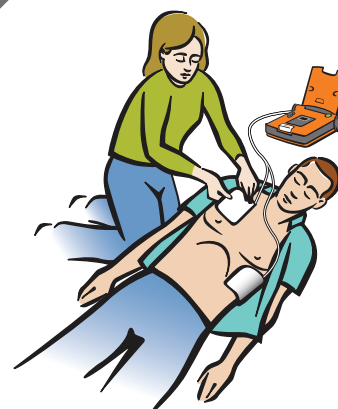

Placez les électrodes.

7




Ne touchez pas le patient.

8




Si nécessaire, le DAE administre automatiquement le choc.

9

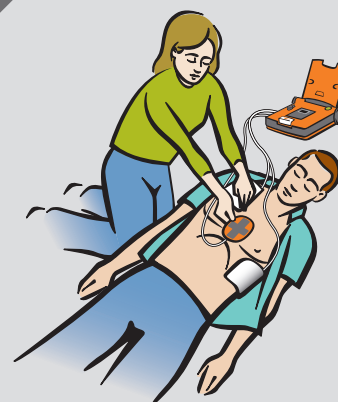

Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

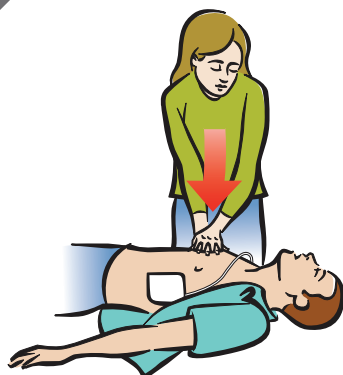

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

DAE automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2019. Tous droits réservés.  
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531, États-Unis  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hanovre  
Allemagne



70-02001-11 A

