

UTFÖRA EN RÄDDNING

1



Reagerar patienten på tilltal?

2




Ring efter ambulans!

3



Hämta
AED-enheten.

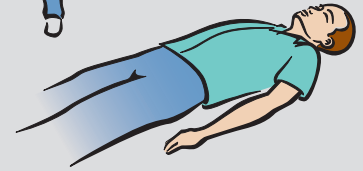

4



Placera AED-enheten
på marken.
Öppna locket.

5



Avlägsna kläderna.
Blotta bröstkorgen.

6



Fäst elektroderna.

7



Vidrör inte patienten.

8




Vid behov avger AED-enheten
defibrillering automatiskt.

9



Om HLR-enhet finns,
placera den på patienten.

10

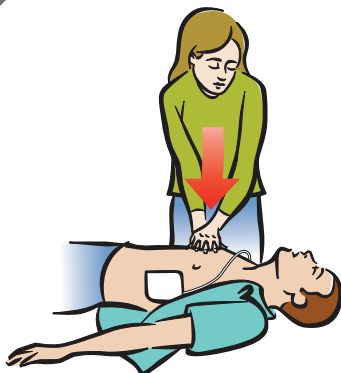

Följ AED-enhetens
meddelanden.
Ge kompressioner.

11



Vid eventuell instruktion,
ge inblåsningar.

Automatisk AED



Cardiac Science och logotypen med hjärtsymbolen är
varumärken som tillhör Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Med ensamrätt.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Tyskland



70-02001-13 A

