

# PRZEPROWADZANIE AKCJI RATUNKOWEJ

1



Czy pacjent reaguje?

2




Wezwij pogotowie ratunkowe!

3



Weź defibrylator AED.

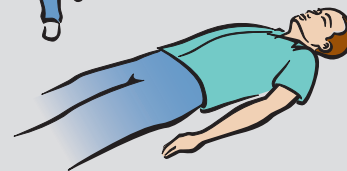

4




Umieść defibrylator AED na podłodze. Otwórz pokrywkę.

5



Usuń ubranie. Odsłoń klatkę piersiową.

6

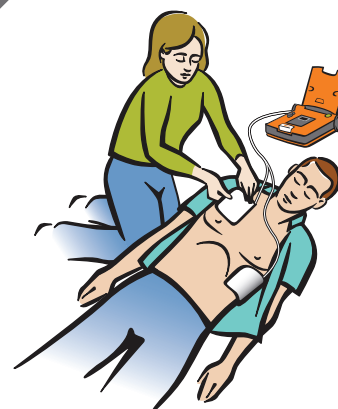

Przymocuj elektrody.

7




Nie dotykaj pacjenta.

8




Gdy będzie to wymagane, defibrylator AED dostarczy wstrząs automatycznie.

9

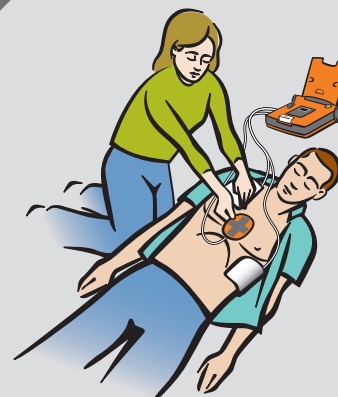

Umieść urządzenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), jeśli jest dostępne.

10

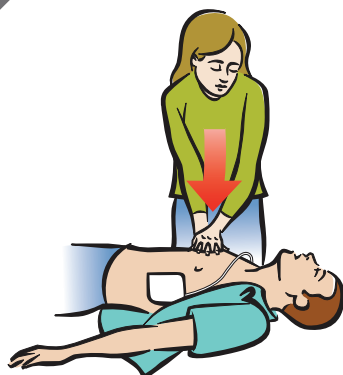

Postępuj zgodnie z komunikatami defibrylatora AED. Wykonaj uciski klatki piersiowej.

11



Po wyświetleniu instrukcji, wykonaj sztuczne oddechy.

**Automatyczny defibrylator AED**



Cardiac Science oraz logo w kształcie serca-tarczy są znakami towarowymi firmy Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.  
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Niemcy



70-02001-22 A

