

實施救援

1



患者有反應嗎？

2




請撥打緊急服務！

3



取出自動體外除顫器。

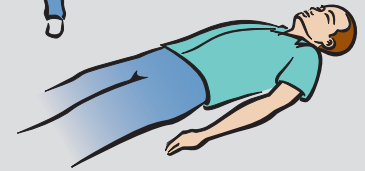

4



取出自動體外除顫器。

5



脫掉衣服。暴露胸部。

6



連接墊片。

7



不要觸摸患者。

8




如有指示，
按下紅色閃爍的按鈕。

9



如果有，
放置心肺復甦裝置。

10

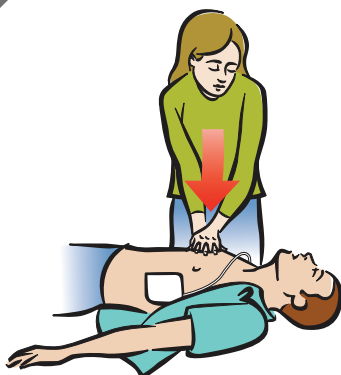

遵循自動體外除顫器的提示。
按壓胸部。

11



如有指示，
給予口對口呼吸。

半自動自動體外除顫器



Cardiac Science 和屏蔽心臟 (Shielded Heart) 標誌是
Cardiac Science Corporation 的商標。
版權所有 © 2019 保留所有權利。
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-01972-37 A

