

急救演示

1



患者有反应吗？

2



拨打急救电话！

3



4



将自动体外心脏除颤器(AED)放在地上。打开盖子

5



解开衣服袒露胸部

6



将电极片连接到患者身上

7



不要触碰患者。

8




如需要，自动体外心脏除颤器(AED)可以自动进行电击。

9



如果有心肺复苏机，请将它放到患者身上。

10

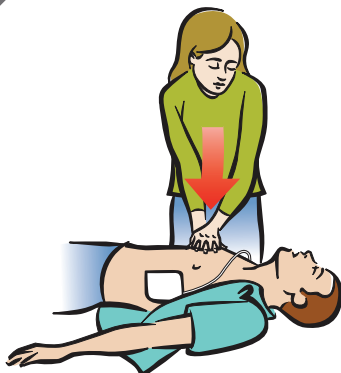

按照自动体外心脏除颤器(AED)的提示，实施胸部按压。

11



如果出现了提示，请为患者进行人工呼吸。

自动体外心脏除颤器 (AED)



Cardiac Science 和盾形心脏标志均属美国心脏科学公司的商标。版权© 2019 保留所有权利。
联系地址：500 Burdick Parkway,
Deerfield, Wisconsin, USA 邮编：53531



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-02001-07 A

